



## Prime 3S

一款高效率、可靠、不占空間、小巧精緻的高壓滅菌鍋，儘管體積纖巧，卻有出奇的裝載能力。每個滅菌循環可應對達 16 支牙科手機或 4 包滅菌袋裝器械。

內建的 134°C 快速滅菌模式總行程約 14 分鐘，能快速即時地供應乾淨的器械，更迅速地用於患者治療，以滿足需求。配備自動電子門鎖，搭載過熱和過壓保護，為現代繁忙、注重品質的醫療、牙科診所提供高效率的滅菌和卓越的安全性。

 4 包滅菌袋裝器械

 16 支牙科手機



## 產品特點

### 安全性及效能

微電腦控制搭載蒸汽產生器使得小巧的內鍋不浪費任何一點可利用的空間，更能高效率的產生飽和蒸汽，提升整體滅菌效率。

內建 134°C 快速滅菌模式，總行程約 14 分鐘，迅速地提供乾淨的器械。

### 水位提示警報

自動偵測儲水箱，當水位不足時將會有圖像提示。

### 觸控螢幕

智慧型整合搭配全採觸控螢幕提供直觀的操作界面，就像使用智慧型手機一樣只需幾個觸控即可完成操作。

### 滅菌追溯系統

內建 10 筆滅菌資料記憶體，有效降低了在移動資料時由於遺忘插入儲存裝置而導致滅菌資料未儲存的失誤風險，可選配外部印表機以紙本形式即時列印儲存滅菌資料。

### 維修保養提示


當耗材或保養次數到達時將，自動提醒更換，確保設備的安全性，延長使用壽命的同時也確保了滅菌效果。

規格	Prime 3S
內鍋容積	3 公升
內鍋尺寸 (Ø x 深)	Ø 123 x 240 mm
內鍋設計壓力	2.5 kg/cm <sup>2</sup>
內鍋設計溫度	150°C
外觀尺寸	380(W) x 380(D) x 240(H) mm
重量	28 kg
總電功率	110 VAC, 50/60 Hz, 1000 W
蒸氣產生方式	蒸汽產生器 (直噴式/非蓄水)
儲水箱儲水量	最大容量 1.0 公升
操作環境	安裝地點在海拔高度在 1,000 m 以下 環境溫度 4°C ~ 40°C 相對溼度 80%RH 31°C ~ 50%RH 40°C

程序名稱	滅菌時間	乾燥時間	總行程時間 **
121 °C Regular 	20 min	14 min	43 min
134 °C Flash 	4 min	1 min	14 min
134 °C Dental 	4 min	8 min	23 min

\*\* 總行程時間為大約值，具體時間將取決於負載量  
上述表格時間是基於冷鍋、最小負載為基礎並包括乾燥時間

## 標準配件

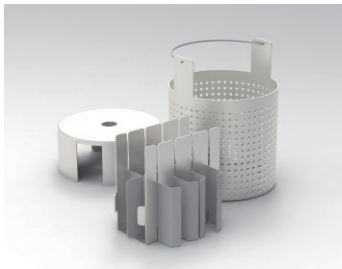

### 滅菌籃組

附提把、隔板和支架  
由 304 不銹鋼製成，尺寸：  
Ø 119 x 153 mm



### 基礎配件

- 操作手冊 x 1 pc.,
- 快速接頭排水管 x 1 pc.,
- 內鍋清潔劑 x 2 pcs.

**Sturdy**  
Wellell Group

248012 新北市五股區中興路一段 168 號  
電話：+886 2 2981 5245  
傳真：+886 2 2981 5245  
信箱：foreign@sturdy.com.tw  
[www.sturdy.com.tw](http://www.sturdy.com.tw)



新駿實業對本型錄所刊載之產品資料保留修改權利，恕不另行通知。

